

# SPRZĘTY W NASZYCH PRACOWNIACH

## 1. Ionto Comed

**Kombajn kosmetyczny IONTO COMPACT SET K1** wyposażony został w niezawodny wapozon Ionto Herb z aromaterapią oraz funkcję Ionto Peel, Ionto Vac Spray, Ionto Skin Regulator, Ionto Ice & Heat, Ionto HF oraz Ionto Galvano. Praktyczna półka pozwala na umieszczenie dodatkowego osprzętu do kombajnu np. w postaci kamieni, szczotek, pelot czy elektrod.



## 2. Elektrostymulacja

Urządzenie **IONTO LIFT MASTER** oferuje możliwość przeprowadzenia zabiegu elektrostymulacji na twarzy oraz na ciele. Zapisane w urządzeniu programy pozwalają zaoferować szeroki wachlarz zabiegów. Urządzenie IONTO LIFT MASTER znajduje zastosowanie w następujących przypadkach: pobudzenie przepływu limfy oraz ukrwienia, pobudzenie procesu przemiany materii, wygładzanie zmarszczek, regeneracja skóry, wzmocnienie napięcia mięśni, cellulit, zabieg odprężający, wellness, witalizujący.



## 3. Mikrodermabrazja korundowa

**Skin Peeler firmy Reviderm** to zaawansowane technologicznie urządzenie, którego użycie do niedawna było zarezerwowane tylko dla dermatologów. Aparat wykorzystuje system Vacuum-Kompresor, podczas gdy kryształki złuszczające uderzają o powierzchnię skóry, jest ona lekko zasysana, kosmetyczka nie stosuje nacisku na skórę, a jedynie przesuwając końcówkę aparatu po powierzchni skóry. Złuszczony naskórek, zanieczyszczenia i zużyte kryształki są natychmiast odsysane z powierzchni skóry i odprowadzane do osobnego pojemnika. Zabieg jest całkowicie bezbolesny.



#### **4. Mikrodermabrazja diamentowa**

##### **Microdermabrasion Diamond System firmy Rubica.**

Mikrodermabrazja diamentowa polega na mechanicznym usuwaniu warstwy rogowej naskórka, aż do pożądanego poziomu, a stopień głębokości mikrodermabrazji zależy od kilku czynników: wybranego podciśnienia, średnicy głowicy, stopnia gradacji diamentu i czasu pracy w jednym miejscu. W skład urządzenia wchodzi komplet 9 głowic diamentowych, które należy dobrać w zależności od miejsca zabiegowego oraz stopnia złuszczenia jakie chce się osiągnąć.

Mikrodermabrazja jest nowoczesną, przynoszącą doskonałe efekty metodą peelingu, która pozwala w delikatny sposób usunąć obumarłe i zrogowaciałe komórki skóry. W ten sposób pobudzona zostaje zdolność do tworzenia się nowych komórek - skóra staje się czystsza, odświeżona, wygląda młodziej. Mikrodermabrazja jest czymś więcej niż tylko zwykłym peelingiem, pobudza ona w skórze różnorodne fizjologiczne procesy. Oprócz powstawania nowych komórek tworzą się również nowe włókna kolagenowe – zmarszczki zostają spłycone.



**5. Kombajn kosmetyczny MIMARI 7 w 1: Mikrodermabrazja Diamentowa, Ultradźwięki, Peeling Kawitacyjny, Sonoforeza, Mezoterapia Bezigłowa, Jonoforeza, Galwanizacja**



Kombajn kosmetyczny Mimari 7w1 pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu:

- odmładzania
- terapii przeciwtrądzikowej
- terapii naczyniowej
- terapii przeciw przebarwieniom
- terapii antycellulitowej
- terapii modelującej sylwetkę

## **6. URZĄDZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO FIRMY RUBICA**

### **Ultra Cavi Sonic Classic**

Peeling kawitacyjny i sonoforeza

Ultradźwięki stanowią coraz popularniejszą metodę oczyszczania skóry zwaną peelingiem kawitacyjnym. Fala ultradźwiękowa rozchodząca się w środowisku wodnym, które najczęściej stanowi delikatny tonik, tworzy pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym powietrzem, które na skutek różnicy ciśnień powiększają się i gwałtownie pękają. Innym zastosowaniem ultradźwięków jest **sonoforeza**. Drgania małej mocy i częstotliwości emitowane przez specjalne głowice rozchodzą się w skórze i tkance podskórnej, pobudzając kolejne cząsteczki do wibracji i rozgrzewania się. Skutkiem tego jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, wzrost zaopatrzenia komórek w krew, a wraz z nią w tlen.



## **7. PEDICURE**

Nowoczesna frezarka z możliwością regulacji w zakresie 6.000 do 40.000 obr./min. **IONTO PEDOVAC D1** to frezarka do pracy techniką na sucho z odciąganiem pyłu.

Mała, nienagrzewająca się, lekka rączka pozwala na wygodną pracę. Dodatkowo umieszczono na niej włącznik i wyłącznik obrotów frezów. Frezarka posiada regulację vacuum w 10 stopniach oraz przyciski pamięci obrotów i vacuum, a także sygnalizację zapełnionego woreczka na pył. Można przełączać kierunek obrotu frezu.



## **8. DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA**

Nasze pracownie wyposażone zostały w profesjonalne urządzenie **AUTOKLAV MELATRONIC 15 EN+**, które wykorzystuje w procesie sterylizacji parę pod ciśnieniem (2 bary/ 134°, 1 bar/ 121°). Urządzenie to spełnia wymogi europejskiej normy EN 13060 (programy klasy S i N). Możliwość dokumentowania procesu sterylizacji poprzez wydruk lub przeniesienie danych na komputer. Pełna sterylność instrumentów dzięki zastosowaniu specjalnych torebek na instrumenty.



Dodatkowo do wspomaganie procesu dezynfekcji stosujemy **myjki ultradźwiękowe**.

## 9. GEM-IPL Record-618

To sprzęt wykorzystujący technologię najnowszej generacji, opatentowany, opracowany przez laboratoria izraelskie. Urządzenie to zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z międzynarodowym standardem dla Medycznego Sprzętu Elektrycznego. Posiada certyfikaty medyczne: EN 60601 - 1 (Medical Safety Standard) oraz CE - MDD (International Medical Standard).

Ta technologia pozwala na selektywne:


- usuwanie mieszków włosowych,
- przebarwień pigmentacyjnych,
- uszkodzonych naczynek,
- rumienia,
- teleangiektazji,
- zmian trądzikowych,



## **10. Derma Stamp Electric Pen My-M**

Nowoczesne urządzenie do **mezoterapii mikroigłowej**, wykorzystywane między innymi do regeneracji skóry, usuwania zmarszczek oraz leczenia blizn i redukcji rozstępów. Specjalne „pióro” szybciej, skuteczniej, a przy tym w sposób mniej bolesny niweluje niedoskonałości skóry.

Podczas zabiegów urządzeniem Derma Stamp Pen My-M powstają w skórze kanaliki tzw. mikrouszkodzenia stymulując tym samym zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że wolniej się starzejemy. Jego podstawowym zadaniem jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami z jednoczesnym pobudzeniem żywych warstw skóry. Prowadzi to do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny. Każdy kolejny zabieg stopniowo sptyca blizny oraz niweluje zmarszczki. Urządzenie posiada regulowaną częstotliwość nakłuć (od 25 do 90 razy na sekundę) co skraca czas zabiegu oraz zmniejsza jego bolesność.

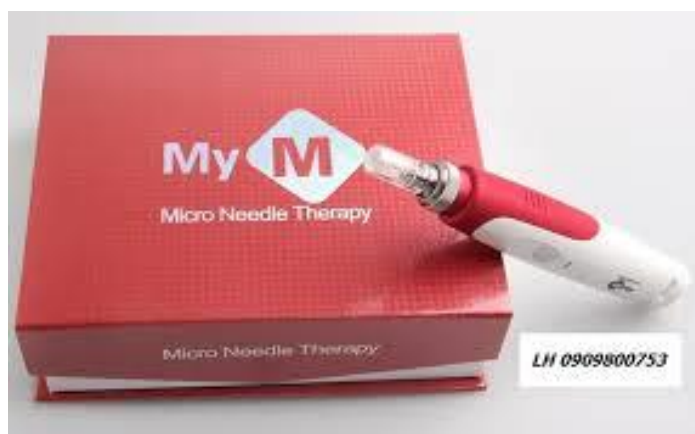

## **11. Komputerowy Analizer skóry Nati**

Urządzenie, opracowane przez zespół badawczy złożony z kosmetologów, dermatologów, chirurgów plastyków oraz inżynierów i informatyków, udowadnia, że technologia to nieocenione wsparcie kosmetologii. Dzięki niej już nie tylko wprawne oko dermatologa czy kosmetyczki, lecz także obiektywne pomiary, wykonywane przez analizer, wskazują indywidualne potrzeby skóry.

Dlatego współczesna kosmetologia odchodzi od sztywnego określania typów skóry: każdy z nas może mieć w obrębie twarzy wiele rodzajów cery. Także w jednym miejscu dokuczać nam może wiele problemów: odwodniona może być przecież zarówno skóra sucha, jak i tłusta. Sama kondycja skóry także cały czas się zmienia w zależności od sposobu pielęgnacji, pory roku, trybu życia, stresu czy wieku. Analizer **Nati** w pięć minut zbiera dane o sześciu parametrach stanu skóry, które bez jego pomocy ludzie oko może ocenić tylko subiektywnie.

**Pierwszy wymiar - struktura powierzchni skóry**

**Drugi wymiar - natłuszczenie**

**Trzeci wymiar - złuszczenie**

**Czwarty wymiar - pory**

**Piąty wymiar - zmarszczki**

**Szósty wymiar - nawilżenie**





## **12. RADIO FREQUENCY HEBE**

Urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry. Urządzenie wyposażone jest w 3 głowice specjalnie dostosowane do różnych powierzchni zabiegowych: okolice oczu, twarz, szyja, dekol, ramiona, brzuch, pośladki i uda.

### **EFEKTY DZIAŁANIA zabiegów to:**

- ujędrnienie i poprawa owalu twarzy
- szybkie spłycenie zmarszczek
- możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu
- likwidacja cieni pod oczami
- odmłodzenie i regeneracja
- pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny
- ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała
- skuteczna walka z cellulitem



## 13. BTL – 5000

**BTL-5000** to wielofunkcyjny system do fizykoterapii który spełnia wszystkie bieżące oraz przyszłe potrzeby terapeutyczne. Dzięki modułowości i szerokiej liczbie możliwych konfiguracji aparat BTL-5000 jest dopasowana do potrzeb naszych studentów.

**Seria BTL-5000 to:**

***Elektroterapia + Terapia ultradźwiękowa + Laseroterapia + Magnetoterapia***



## 14. RADIO FREQUENCY

**RF HEBE** to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.



## 15. Oxybrazja HEBE

**OXYBRAZJA**, nazywana inaczej mikrodermabrazją wodno-tlenową, to rodzaj peelingu mechanicznego gdzie czynnikiem złuszcającym naskórek jest strumień rozproszonych kropelek soli fizjologicznej aplikowanych pod ciśnieniem sprężonego powietrza za pomocą specjalnie skonstruowanego aplikatora. Zabieg ten jest skuteczną a zarazem w pełni bezpieczną metodą złuszczenia naskórka umożliwiającą przeprowadzenie go u osób o cerze naczynkowej, delikatnej i wrażliwej. Podstawowym działaniem oxybrazji jest złuszczenie powierzchniowych warstw naskórka, przez co pobudzany jest proces naskórkowania, czyli gojenie się naskórka.



## 16. LIPOLASER MAXMEDIKA

**Lipolaser Duo** jest urządzeniem wykorzystywanym w zabiegach na ciało. W tym urządzeniu została zastosowana innowacyjna technologia redukcji tkanki tłuszczowej. Do wiązki laserowej o długości 650 nm została dodana podczerwień 940 nm, która wspomaga i wzmacnia efekt. Lipolaser modeluje sylwetkę, zredukuje tkankę tłuszczową oraz cellulit.



## 17. MEDIKA PREMIUM 2W1

Medika premium 2w1 to urządzenie które łączy w sobie takie funkcje jak promieniowanie podczerwone IR, ultradźwięki oraz dermomasaż.

**W pierwszej fazie** zabiegu skóra zostaje poddana działaniu promieniowania podczerwonego, co powoduje wzrost temperatury w tkankach. Poprawia się metabolizm komórkowy, a produkty przemiany materii są usuwane na zewnątrz przez gruczoły potowe oraz układ limfatyczny i naczyniowy.

**W drugiej fazie** kluczową rolę odgrywają ultradźwięki, które uszkodzają błony komórkowe adipocytów i umożliwiają redukcję cellulitu.

**Trzecia faza to Dermomasaż**, inaczej cellulogia lub masaż próżniowy, to połączenie masażu mechanicznego z podciśnieniem, z jednoczesnym zasysaniem fałdu skóry i rolowaniem ruchomymi rolkami. Metoda ta polega przede wszystkim na rozbijaniu tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie na zmniejszeniu cellulitu.



## MEDIKA PREMIUM 2w1

## 18. RFrax Lift

Rfrax to urządzenie, które za pomocą mikroigieł przesyła falę radiową na odpowiednią głębokość skóry, dając efekt równomiernego i precyzyjnego podgrzania określonych struktur skóry. Jest to połączenie metody nakłuwania skóry mikroigłami (frakcjonowania) w połączeniu z ogrzewaniem tkanek za pomocą prądu o częstotliwości radiowej.

